

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР

МОДЕЛЬ KR-N01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Многофункциональный массажер «Доктор суставов Мобил»
Модель: KR-N01
Мощность: 12.6 Вт
Вход устройства: 8.4 В / 1500 мА
Вход адаптера: 100-240 В / 50/60 Гц



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



8-800-500-88-18
www.vital-rays.ru

ПРОИЗВЕДЕНО / PRODUCED:

RUIAN E-COZY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD.
Add: No. 168, Shidai Road, International Auto Industry Zone, Ruian City,
Zhejiang Province, China.

ПО ЗАКАЗУ / BY ORDER:

ООО «ВИТАЛ РАЙЗ» / VITAL RAYS, LLC
Адрес: 350012, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 26
Add: 350012, Russian Federation, Krasnodar, Krugovaya str., 26.

EAC



Благодарим Вас за приобретение продукции «Витал Райз»!

Перед использованием многофункционального массажера «Доктор суставов Мобил» внимательно изучите данное руководство и соблюдайте все необходимые меры предосторожности.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Многофункциональный массажер «Доктор суставов Мобил» – современный универсальный прибор для ежедневного ухода за суставами (коленными, плечевыми, локтевыми, тазобедренными).

«Доктор суставов Мобил» сочетает в себе вибрационный массаж и воздействие длинноволновым инфракрасным теплом (благодаря 4-м нефритовым медальонам). Это позволяет комплексно проработать суставы и получить максимальный эффект.

Кроме того, в массажере предусмотрена возможность регулировки длительности одного сеанса массажа (5 мин., 10 мин., 15 мин.).

Стильный лаконичный дизайн, эластичность и эргономичная форма аппарата делают его удобным для всех членов семьи. Компактный размер и небольшой вес позволяют брать массажер с собой в различные поездки.

Использовать массажер «Доктор суставов Мобил» можно как подключенным к электросети, так и автономно, что позволяет совмещать процедуры с другими делами даже вне дома.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Сохранность и эффективное использование массажера возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
2. Перед первым использованием осмотрите массажер и убедитесь в отсутствии повреждений.
3. Во время массажа следите за своим самочувствием. По возможным противопоказаниям проконсультируйтесь со специалистом.
4. Если вы страдаете серьезными хроническими заболеваниями или проходите курс лечения, перед применением массажера проконсультируйтесь со специалистом.
5. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться со специалистом в следующих случаях:
 - во время второй половины срока беременности;
 - при наличии кардиостимулятора;
 - при лихорадочном состоянии (температуре, ознобе);
 - при остеопорозе 3-4 степени;
 - при наличии злокачественных новообразований в зоне массажа;
6. При наличии повышенной термочувствительности с осторожностью используйте прибор, так как он имеет функцию нагрева.
7. Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями пользоваться прибором без присмотра.
8. Перед тем, как подключить прибор к электросети, убедитесь, что его напряжение соответствует напряжению в розетке.
9. Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью и высоким атмосферным давлением.
10. Берегите прибор от попадания прямых солнечных лучей, пыли и загрязнений.
11. Во избежание возникновения возго-

рания не оборачивайте адаптер тканью или бумагой, не помещайте провод под коврики или рядом с нагревающимися предметами.

12. Не допускайте контакта массажера с пожароопасными материалами, газами и жидкостями.

13. Никогда не вытаскивайте и не трогайте штепсельную вилку и шнур питания мокрыми руками.

14. Не вставайте, не садитесь на прибор, не кладите на него тяжелые предметы, не роняйте его.

15. Не сгибайте, не затягивайте, не завязывайте шнур питания.

16. Не допускайте попадания воды и других жидкостей в устройство и на его поверхность.

17. Ни в коем случае самостоятельно не модифицируйте, не ремонтируйте, не разбирайте массажер. При возникновении неисправностей обратитесь в сервисный центр «Витал Райз».

18. Не используйте массажер, если тканевое покрытие в зоне массажа прорвалось. Обратитесь в сервисный центр.

19. При возникновении каких-либо повреждений шнура питания или самого прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.

20. Не используйте провода, переходники, адаптеры и прочие запчасти и аксессуары других производителей.

21. При возникновении каких-либо отклонений в работе прибора (например, запаха дыма, нетипичного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование, отключите от электросети и обратитесь в сервисный центр.

22. После использования всегда выключайте массажер и отключайте его от электросети, когда он не заряжается.

23. Шум во время использования массажера является нормальным и не свидетельствует о неисправности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Подсоедините сетевой адаптер к устройству и подключите его к источнику питания. Примерное время зарядки массажера – 2 часа (индикатор на адаптере загорится зеленым, когда устройство полностью зарядится). По завершении зарядки отсоедините адаптер от устройства и источника питания.

ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВА


Нажмите на кнопку «Тепло», чтобы включить функцию прогрева. Нажмите второй раз, чтобы выключить ее. Данная функция может использоваться как самостоятельно, так и совместно с функцией вибрации.

ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ

Нажмите кнопку «Массаж», чтобы включить функцию вибрации. Нажмите второй раз, чтобы выключить ее. Устройство запрограммировано на прерывистую вибрацию, благодаря чему создается эффект пульсирования. Данная функция может использоваться как самостоятельно, так и совместно с функцией прогрева.

ТАЙМЕР

Используйте кнопку «Время», чтобы выбрать длительность процедуры. Одно деление – 5 минут, два деления – 10 минут, три деления – 15 минут. По умолчанию установлен таймер на 15 минут.

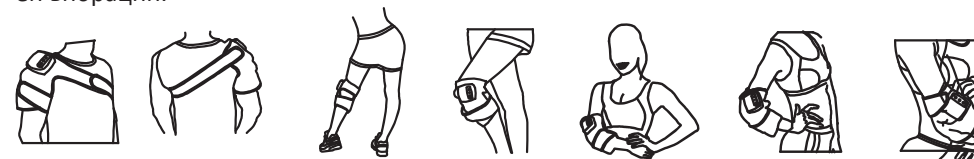

Использование массажера на плече, колене, локте.